


TABELA POMIAROWA



Jak prawidłowo dokonać pomiaru Użytkownika? W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru wózka, należy wykonać pomiar Użytkownika.

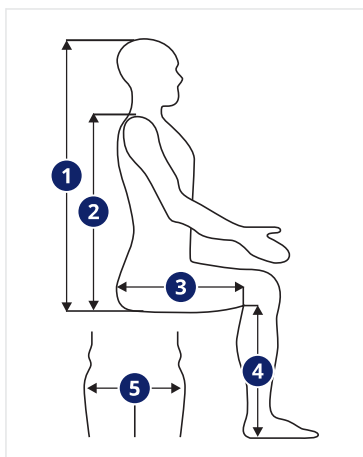

Kluczowe wymiary:

- 1 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 2 Długość korpusu od siedzenia do ramion
- 3 Długość korpusu od pleców do dołka podkolanowego
- 4 Długość goleni (od dołka podkolanowego do podszwy)
- 5 Biodra (odległość między najszerszymi miejscami)

W przypadku występowania garbu konieczne są dodatkowe pomiary:

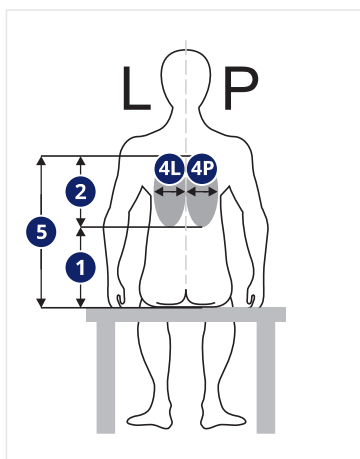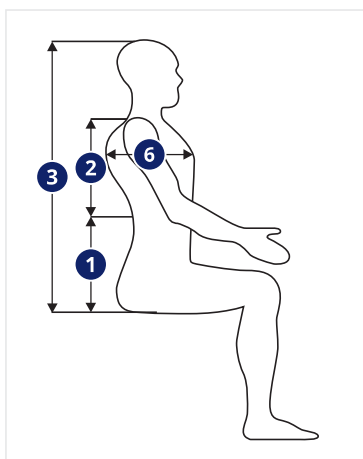

- 1 Długość odcinka lędźwiowego
- 2 Długość garbu od ramion do końca jego występowania
- 3 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 4L Szerokość garbu na lewo od osi ciała
- 4P Szerokość garbu na prawo od osi ciała
- 5 Długość pomiędzy siedzeniem, a szczytem garbu
- 6 Szerokość korpusu od frontu klatki piersiowej do końca garbu